

LES **plus** PRODUIT

EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE

- ▶ **1 mode thérapeutique:** alternance des pressions 1 cellule sur 2

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- ▶ Calcul automatique et continu de la pression de gonflage
- ▶ Interface compresseur intuitive
- ▶ Aide au diagnostic technique accessible par QR code
- ▶ Notice simplifiée

CONFORT D'ALITEMENT

- ▶ Réglage confort: personnalisation du niveau de gonflage
- ▶ Gestion de la position assise

SÉCURITÉ D'UTILISATION

- ▶ Compatible avec le programme de maintenance AIRCARE
- ▶ Alarmes visuelle et sonore

ÉCOLOGIQUE

- ▶ Conçu et fabriqué en France
- ▶ Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement

WINNCARE
F r a n c e

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU
axtair one® plus (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en Promust PU Pour lit en largeur 90cm	VAXT2/ONE-P	195 x 87x17 cm	30 à 150 Kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D
axtair one® plus (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en Promust CIC Pour lit en largeur 90cm	VAXT2/ONE/CIC-P			

Entretien Housse Promust PU et Promust CIC



Garantie 2 ans

Attestation de Conformité Technique N°ESC 17-003/2



Pris en charge par l'assurance maladie

CODE	DÉSIGNATION	TARIF en € TTC	PLV en € TTC
1293872	Escarres, surmatelas air motorisé, WINNCARE, AXTAIR ONE PLUS, forfait location hebdo	10,88	10,88

Arrêté du 26 avril 2018 portant inscription du surmatelas à air motorisé AXTAIR ONE PLUS de la société WINNCARE France au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Ce document est destiné aux Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel médical et aux professionnels de santé.

WINNCARE
F r a n c e

SERVICE COMMERCIAL
+ 33 (0) 4 66 02 15 15
Web : www.winnccare.fr

Fabricant
WINNCARE FRANCE
Site Askle Santé

Dispositif Médical de Classe 1 selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

NOUVEAU

axtair one® plus

**EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE POUR
LES PREMIERS STADES DE L'ESCARRE**

INSCRIT
À LA LPP



AIDE À LA PRÉVENTION D'ESCARRE(S) POUR PATIENT À RISQUE **MOYEN À ÉLEVÉ**

AIDE AU TRAITEMENT D'ESCARRE(S) CONSTITUÉE(S) DE **STADE 1 À 2**

POUR UTILISATEUR JUSQU'À **150 KG**

WINNCARE
F r a n c e

axtar one[®] plus




COMPRESSEUR

- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- ▶ 1 mode thérapeutique: alternance des pressions 1 cellule sur 2
- ▶ Réglages confort: personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise
- ▶ Alarmes visuelle et sonore
- ▶ Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

QR Code pour un accès simple et rapide aux informations produit

- ▶ Référence produit et numéro de série
- ▶ Fiche produit, notice d'utilisation, vidéo produit, FAQ, Autotest

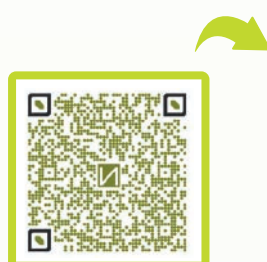

VANNE CPR (CARDIO PULMONARY RESCUE)



- ▶ Ouverture et fermeture simple et rapide
 - ▶ Dégonflage du matelas en moins de 20 secondes en cas d'urgence *
- * Pour un patient de 80 Kg à plat

CE



COMPATIBLE PROGRAMME AIRCARE[®]


HOUSSE



- ▶ Face supérieure : bi-élastique, imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Face inférieure : base anti-dérapante
- ▶ 2 housses disponibles :
PROMUST PU
PROMUST CIC
dotée d'un traitement anti-bactérien aux ions argent

CELLULES

- ▶ 18 cellules en Polyuréthane Ether de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et de 300 µ d'épaisseur
- PLUS DE CONFORT**

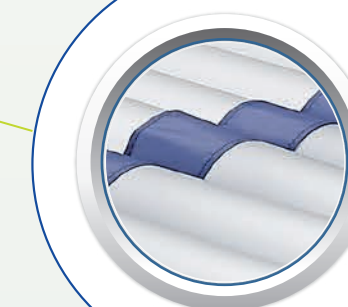

BOUCHON DE TRANSPORT



- ▶ Permet la mise en commun des deux voies en mode transport pour un confort d'allègement et une autonomie de 8 heures.



Pompes de gonflage et dégonflage rapide pour une facilité d'installation et de retrait du matelas



Livré dans un sac de transport