

# ***Fauteuils Releveurs***



Toujours plus de repos et de confort  
grâce à la nouvelle gamme de  
fauteuils releveurs et relax !



---

## Invacare **Cosy Up**

---

Le fauteuil releveur **Cosy Up** apporte un maximum de confort grâce à sa véritable assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-pieds.

Son look épuré et moderne convient au plus grand nombre et lui permet de trouver facilement sa place dans tout type d'environnement.



### Dossier réglable en profondeur de série

---

Grâce à ses deux pattes de fixation, le dossier du **Cosy Up** est réglable en profondeur très simplement.

Ainsi, ce fauteuil releveur s'adapte parfaitement à toutes les morphologies, aussi bien aux plus petites (avec la profondeur 450 mm), qu'aux plus grandes (avec la profondeur 540 mm).



### Deux largeurs d'assise de série

---

Le fauteuil releveur **Cosy Up** est livré avec deux paires de revêtements d'accoudoirs. Ces revêtements, qu'ils soient rembourrés ou fins, se fixent sur les accoudoirs grâce à un système de velcro et de zip. Ils sont donc interchangeables très facilement.



Pour obtenir la petite largeur d'assise de 450 mm, il faut installer les revêtements d'accoudoirs rembourrés.



Pour obtenir la grande largeur d'assise de 530 mm, il faut installer les revêtements d'accoudoirs fins.

### Grandes pochettes latérales

---

Fauteuil équipé de deux pochettes, une à gauche, l'autre à droite, pour y mettre des magazines ou des petits objets.



## Caractéristiques et options



### Revêtements amovibles pour lavage en machine

Les accoudoirs, le dossier et l'assise couette sont fixés sur la base du fauteuil releveur grâce à des systèmes de zip et de velcro. Tous ces éléments sont donc amovibles très facilement, ce qui permet le lavage en machine à 30° ou 40° selon les tissus.



### La télécommande toujours à portée de main

Pratique, grâce à la conception des accoudoirs, l'utilisateur a la possibilité de placer la télécommande du fauteuil (ou celle de la télévision) sous les revêtements d'accoudoirs. Ainsi, la télécommande est toujours accessible !

## Options et Configurations



### Version 1 moteur

Télécommande ergonomique 2 boutons rétroéclairés, simple d'utilisation.



### Version 2 moteurs

Télécommande ergonomique 4 boutons + 2 boutons de synchronisation, simple d'utilisation.



### Fonction dos au mur

Grâce à la fonction dos au mur, de série sur la version 1 moteur du **Cosy Up**, le dossier du fauteuil releveur peut être placé très près d'un mur sans que cela n'entrave la parfaite utilisation de toutes les fonctions. Grâce à une conception optimisée pour les petits espaces, seulement 9 cm sont nécessaires entre le mur et le fauteuil pour permettre une inclinaison totale du dossier.

## Caractéristiques et options

### Tissus EasyClean : nettoyable à l'eau !

Tissu antibactérien et déperlant, traité spécialement pour un nettoyage à l'eau. Les tissus EasyClean permettent d'enlever les tâches quotidiennes comme le café, le chocolat ou encore le vin uniquement avec un linge propre et de l'eau. Le tissu EasyClean empêche les tâches de pénétrer dans le tissu et protège ainsi durablement le fauteuil.

Pratique et esthétique, ce tissu anti-tâche prévient la moisissure et résiste au feu conformément aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2. Lavables en machine jusqu'à 40°C et aptes au sèche-linge, les coussins EasyClean tendances et confortables font du **Cosy Up**, le fauteuil idéal pour une utilisation en collectivité, en EHPAD et en maisons de retraite !



EasyClean Jaune



EasyClean Bleu



EasyClean Taupe



EasyClean Gris



### Tissu Graphique

Pour un fauteuil toujours plus confortable, le set de coussin Graphique est disponible sur le **Cosy Up** (réf. 1650213). Ce tissu design, en coton très résistant est facile à entretenir et correspond à tous les environnements.





## Caractéristiques et options

### Cosy Up : mixez, choisissez et changez de coloris suivant vos humeurs !

Avec ses **6 choix de coloris de coussins** et ses **2 choix de bases**, le **Cosy Up** est LE fauteuil releveur **configurable**. Changez de housse comme d'humeur et transformez votre intérieur en seulement quelques minutes. La configurabilité du **Cosy Up** permet au distributeur, dans un espace réduit, de présenter plusieurs coloris en changeant uniquement le coussin (gains de place et d'inventaire !).

Vous pouvez commander au choix soit un fauteuil complet ou bien créer le fauteuil qui vous plaît, en sélectionnant la base et en choisissant les coussins que vous souhaitez : vous pouvez maintenant changer autant de fois que vous le voulez !

## Bases



**Base télécommande  
1 moteur PVC Taupe**

Réf. 1650169



**Base télécommande  
2 moteurs PVC Taupe**


Réf. 1650205

## Coussins



**EasyClean Jaune**

anti-feu EN 1021-1 et  
1021-2  
Réf. 1650210

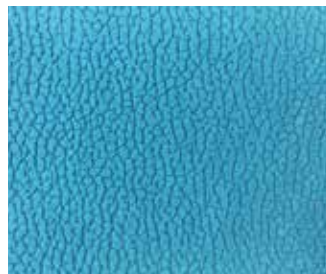


**EasyClean Bleu**

anti-feu EN 1021-1 et  
1021-2  
Réf. 1650211




**EasyClean Taupe**

anti-feu EN 1021-1 et  
1021-2  
Réf. 1650212

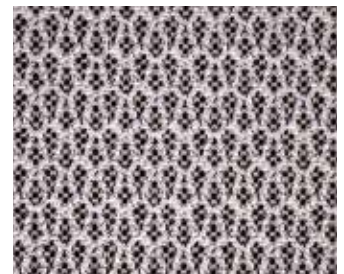

**Tissu Graphique**

Réf. 1650213

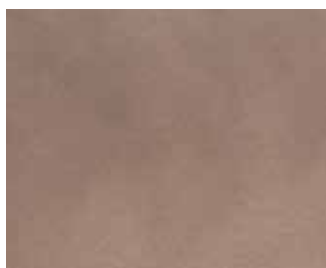

**Microfibre Taupe**

Réf. 1650208



**PVC/Polyester Taupe**

Réf. 1650209

**NOUVEAU**



**Nouveau coloris  
moderne Bicolore Gris**

- Base PVC/Polyester Gris Foncé
- Revêtement tissu **EasyClean** Gris Clair
- Fauteuil complet
- Disponible en version 1 moteur

Réf. 1660843



**Faro**  
Vert d'eau

**NOUVEAU**

**Le bon compromis entre confort et simplicité**

Fonctionnels et épurés, les fauteuils **Fino** et **Faro** présentent un design moderne qui s'adaptera facilement à tout type d'environnement. L'appui-tête, de série, offre un bon maintien et complète le look de ce fauteuil. Les nouveaux coloris Vert d'eau et Rose poudré trouveront parfaitement leur place dans des environnements modernes.

Le fauteuil **Fino** offre des dimensions d'assise réduites : largeur 450 mm x profondeur 450 mm et bénéficie d'accoudoirs rembourrés.

Fonction dos au mur: nécessite un recul de seulement 90 mm pour la version 1 moteur.



**Fino**  
Rose poudré

**Plusieurs versions disponibles**

Ces deux modèles existent en version 1 moteur qui permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément. Le fauteuil **Faro** quant à lui existe également en version 2 moteurs (permet un réglage indépendant du dossier et du repose-pieds) et en version relax manuel (le basculement progressif vers l'arrière s'effectue grâce à un simple appui sur les accoudoirs).



**Fino** - Microfibre Camel



**Faro**- Tissu PVC/Polyester noir



**Faro** - Microfibre Camel

**Caractéristiques**



Appui-tête pour un meilleur maintien et un maximum de confort. Il est amovible si besoin.



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 2 boutons rétroéclairés. (Version 1 moteur).



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 4 boutons. (Version 2 moteurs).



Poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets. (Versions avec moteur).

**Coloris**



**Codes**

- 1644969** **Fino** 1 moteur Microfibre Camel
- 1657011** **Fino** 1 moteur Polyester Rose Poudré **NOUVEAU**
- 1608089** **Faro** relax Tissu PVC/Polyester Noir
- 1608090** **Faro** 1 moteur Microfibre Camel
- 1657010** **Faro** 1 moteur Polyester Vert d'eau **NOUVEAU**
- 1608091** **Faro** 1 moteur Tissu PVC/Polyester Noir
- 1608092** **Faro** 2 moteurs Microfibre Camel



Tissu PVC/  
Polyester taupe

### La rencontre entre élégance et confort !

Le fauteuil **Douro** offre un confort supplémentaire grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds. Ce fauteuil bénéficie de maintiens latéraux et d'une protection en tissu amovible au niveau de la tête. Grâce à ses lignes épurées et à sa faible largeur hors tout, il trouvera facilement sa place au domicile de l'utilisateur.

Fonction dos au mur: nécessite un recul de seulement 100 mm pour la version 1 moteur.

### Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil **Douro** existe en version 1 moteur qui permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément.

Il est également disponible en version relax manuel : le basculement progressif vers l'arrière s'effectue grâce à un simple appui sur les accoudoirs.



Microfibre camel



Microfibre rouge rubis



Tissu PVC/Polyester  
taupe



Tissu PVC/Polyester  
chocolat

### Caractéristiques



Maintiens latéraux de la tête pour toujours plus de confort.



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 2 boutons rétroéclairés. (Version 1 moteur).




Poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets. (Version 1 moteur).




Livré avec une deuxième protection en tissu pour permettre le lavage de la première.

### Coloris

Microfibre Camel

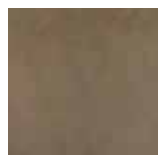


Microfibre Rouge Rubis

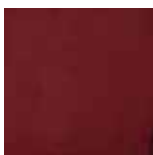

Tissu PVC/  
Polyester Taupe



Tissu PVC/  
Polyester  
Chocolat

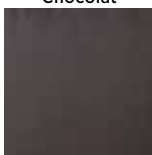

### Codes

**1608093** **Douro** relax Tissu PVC/Polyester Chocolat

**1608094** **Douro** 1 moteur Microfibre Camel

**1608095** **Douro** 1 moteur Microfibre Rouge Rubis

**1608096** **Douro** 1 moteur Tissu PVC/Polyester Taupe

**1608097** **Douro** 1 moteur Tissu PVC/Polyester Chocolat



Microfibre gris /  
Passepoil blanc

### Design sobre et classique

Le design du fauteuil **Porto<sub>NG</sub>**, notamment grâce à sa finition passepoil blanc présente sur les modèles en microfibre, lui permet de s'intégrer dans tout type d'environnement. Il offre toujours plus de confort grâce à la continuité entre l'assise et le repose-pieds et aux maintiens latéraux présents au niveau de la tête.

Fonction dos au mur : nécessite un recul de seulement 50 mm pour la version 1 moteur.

### Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil **Porto<sub>NG</sub>** existe en version 1 moteur qui permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément.

La version 2 moteurs quant à elle permet un réglage indépendant du dossier et du repose-pieds.



Microfibre camel /  
Passepoil blanc



Tissu PVC/Polyester  
chocolat



Tissu PVC/Polyester  
taupe



Microfibre gris /  
Passepoil blanc

### Caractéristiques



Design sans précédent grâce à la finition passepoil Blanc.



Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 2 boutons rétroéclairés. (Version 1 moteur).




Télécommande simple d'utilisation et ergonomique avec 4 boutons. (Version 2 moteurs).



Poche latérale pour y glisser la télécommande ou des petits objets.

### Coloris


Tissu PVC/  
Polyester Taupe

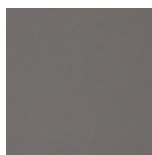


Microfibre Camel  
avec passepoil  
Blanc



Tissu PVC/  
Polyester  
Chocolat

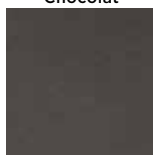

Microfibre Gris  
avec passepoil  
Blanc

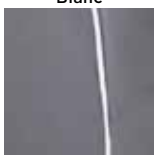

### Codes

**1608133** **Porto<sub>NG</sub>** 1 moteur Microfibre Camel avec passepoil Blanc

**1608134** **Porto<sub>NG</sub>** 1 moteur Tissue PVC/Polyester Chocolat

**1608135** **Porto<sub>NG</sub>** 2 moteurs Microfibre Gris avec passepoil Blanc

**1608136** **Porto<sub>NG</sub>** 2 moteurs Tissu PVC/Polyester Taupe



## Tableau des caractéristiques

		Coloris	Position Relax	Position Releveur	Position Repos	Continuité entre assise et repose-pieds	Prof. d'assise	Hauteur d'assise	Largeur d'assise
<b>1 MOTEUR DOS AU MUR</b>									
1644969	Fino	Microfibre Camel	◆	◆			450 mm	470 mm	450 mm
1657011		Polyester Rose Poudré	◆	◆					
1608090	Faro	Microfibre Camel	◆	◆			540 mm	470 mm	530 mm
1657010		Polyester Vert d'eau	◆	◆					
1608091		Tissu PVC/ Polyester Noir	◆	◆					
1608094	Douro	Microfibre Camel	◆	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608095		Microfibre Rouge Rubis	◆	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608096		Tissu PVC/ Polyester Taupe	◆	◆		◆			
1608097		Tissu PVC/ Polyester Chocolat	◆	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608133	Porto <sub>NG</sub>	Microfibre Camel avec passepoil Blanc	◆	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608134		Tissu PVC/ Polyester Chocolat	◆	◆		◆	540 mm	470 mm	530 mm
	Cosy Up	Bi-matière	◆	◆		◆	450 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm
<b>2 MOTEURS</b>									
1608092	Faro	Microfibre Camel	◆	◆	◆		540 mm	470 mm	530 mm
1608135	Porto <sub>NG</sub>	Microfibre Gris avec passepoil Blanc	◆	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
1608136		Tissu PVC/ Polyester Taupe	◆	◆	◆	◆	540 mm	470 mm	530 mm
	Cosy Up	Bi-matière	◆	◆	◆	◆	450 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm
<b>MANUEL</b>									
1608089	Faro	Tissu PVC/ Polyester Noir	◆				540 mm	470 mm	530 mm
1608093	Douro	Tissu PVC/ Polyester Chocolat	◆			◆	540 mm	470 mm	530 mm

## Les différentes positions



**POSITION RELAX:** Position confort avec bascule de l'assise et du dossier. Cette action est combinée avec les fauteuils 1 moteur et peut être désynchronisée pour une position sur-mesure avec les fauteuils 2 moteurs.



**POSITION RELEVEUR:** Position permettant de s'asseoir et de se relever sans effort.



**POSITION REPOS:** Position couchée pour s'allonger et dormir.

	Inclinaison maximum du dossier	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Profondeur hors tout Fermé	Profondeur hors tout Ouvert	Recul nécessaire pour inclinaison maximale	Hauteur sol/accoudoirs	Poids maximum utilisateur	Poids du produit	Densité de la mousse
<b>1 MOTEUR DOS AU MUR</b>										
<b>Fino</b>	120°	1000 mm	730 mm	780 mm	1520 mm	90 mm	670 mm	125 kg	53 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Faro</b>	120°	1110 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	90 mm	600 mm	125 kg	50 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Douro</b>	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	100 mm	640 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 28kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Porto<sub>NG</sub></b>	120°	1020 mm	790 mm	910 mm	1580 mm	50 mm	600 mm	125 kg	52 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Cosy Up</b>	120°	1050 mm	770 <sup>1</sup> / 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm	640 <sup>1</sup> / 700 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 18kg/m <sup>3</sup>
<b>2 MOTEURS</b>										
<b>Faro</b>	135°	1110 mm	770 mm	880 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	125 kg	50 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Porto<sub>NG</sub></b>	135°	1020 mm	790 mm	860 mm	1670 mm	460 mm	600 mm	125 kg	52 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Cosy Up</b>	135°	1050 mm	770 <sup>1</sup> / 800 mm	910 mm	1720 mm	460 mm	640 <sup>1</sup> / 700 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 18kg/m <sup>3</sup>
<b>MANUEL</b>										
<b>Faro</b>	120°	1080 mm	770 mm	880 mm	1580 mm	480 mm	600 mm	125 kg	50 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 18kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>
<b>Douro</b>	120°	1080 mm	740 mm	860 mm	1580 mm	220 mm	640 mm	125 kg	57 kg	Assise 28kg/m <sup>3</sup> Dossier 28kg/m <sup>3</sup> Accoudoirs 28kg/m <sup>3</sup>

## Les pièces détachées

### Pour les modèles avec moteur(s), pièces communes :

1577638 Transformateur + câble secteur

1577640 Batterie externe + câble (permet d'utiliser les modèles avec moteur(s) sans être branchés sur le secteur, de manière occasionnelle)

### Pour les modèles en version 1 moteur :

SP1604803

Moteur

SP1604806

Télécommande 2 boutons rétroéclairés, avec fil

### Pour les modèles en version 2 moteurs :

SP1604804

Moteur fonctions releveur et repose-pieds combinées

SP1604805

Moteur de dossier

SP1604807

Télécommande 4 boutons, avec fil